

M5 HiPer 重组蛋白 G 使用说明书

产品名称	单位	货号
M5 HiPer 重组蛋白 G	0.5mg	MFP04002-01
M5 HiPer 重组蛋白 G	10mg	MFP04002-10

【储存条件】

本产品经无菌过滤后分装，保存于-20℃冰箱，一般应避免反复冻融。建议分装成小份，每次使用一份

【质量控制】

纯度：经 SDS-PAGE 电泳检测纯度>95%

稳定性：样品在-20℃保存一年稳定

【保存缓冲液】


20mM Tris.Cl, 100mM NaCl, pH8.5

【产品浓度】

25.4 mg/mL

【产品简介】

本公司生产的重组 Protein G 由原核系统表达、经分离纯化、除菌过滤等步骤制成。能与入及多种动物（兔、大鼠、豚鼠、牛、猫、小鼠、鸟、羊）IgG 的 Fc 区发生结合，但不与 IgA 和 IgM 结合。用于免疫分析和 IgG 纯化。

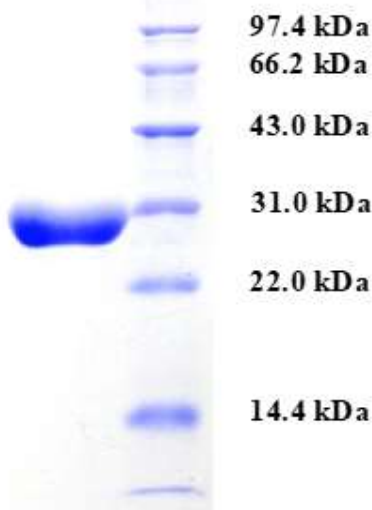

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。